


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Масажер для ніг

Інструкція з експлуатації

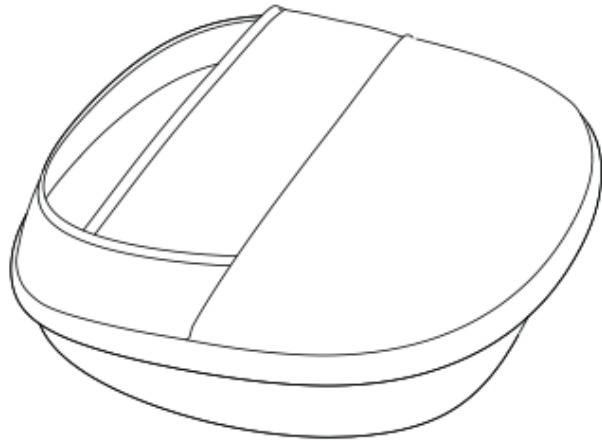

Юридична заява:

- Будь ласка, зберігайте цей посібник належним чином.
- Цей матеріал надається лише для довідки та не є жодним видом зобов'язань.

Виріб (включаючи, але не обмежуючись колір, розмір, форму тощо) може відрізнятися, будь ласка, орієнтуйтеся на фактичний продукт.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

- **Модель:** 3200AW
- **Назва:** Масажер для ніг
- **Інспектор:** _____
- **Дата виробництва:** _____

Виконавчі стандарти:

- GB 4706.1-2005
- GB 4706.10-2008



Зміст

1.	Примітки	1
	○ Опис символів	
	○ Заборонені групи	
	○ Застереження	
	○ Екологічні умови	
	○ Заходи безпеки при обслуговуванні	
2.	Функції продукту	4
3.	Компоненти	4
4.	Інструкції	5
	○ Підготовка перед використанням	
	○ Експлуатація	
5.	Обслуговування та догляд	6
	○ Метод очищення	
6.	Діагностика несправностей	6
7.	Заява про захист довкілля	7
8.	Основні технічні параметри	7
9.	Склад комплекту продукту	7

1. Примітки

- Будь ласка, уважно прочитайте та збережіть цей посібник перед використанням.

Опис символів

-  Вказує на заборону.
-  Вказує на необхідність дотримання інструкцій.

Заборонені групи

! Наступні групи мають використовувати пристрій з обережністю. Якщо ви проходите лікування в медичній установі або маєте будь-який із наведених нижче станів, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або фізіотерапевтом перед використанням:















- Люди з імплантованими медичними електричними пристроями, пов'язаними з кардіостимуляторами.
- Люди зі злоякісними пухлинами та хворобами серця.
- Вагітні жінки або жінки, що народжують.
- Люди з розладами нервових закінчень, спричиненими діабетом.
- Люди з травмами шкіри.
- Будь-хто з температурою тіла вище 38 градусів.
- Люди, які мали болі в попереку, голові, спині або стопах у минулому.
- Люди, схильні до оніміння рук і ніг.
- Люди, які мають труднощі з диханням.
- Люди з гіпертонією (високим артеріальним тиском).
- Захворювання внутрішніх органів (гастрит, гепатит, гастроентерит) та інші гострі симптоми.
- Грижа міжхребцевого диска, спондиліт та інші подібні стани.
- Деформуючий артрит, артрит, подагра.
- Переломи хребта, набряки кісток.
- Втрата температурної чутливості шкіри.
- Люди з опіками від переохолодження (гіпотермії).
- Люди з аномаліями кісток спини.
- Судинні розлади.
- Особи, які перебувають у стані реабілітації.
- Люди з аномальними відчуттями в тілі.

• Наступним особам/у ситуаціях використання заборонено









Лікарі рекомендують не використовувати пристрій людям, які не роблять фізичних вправ або розтяжки, а також при таких станах, як тромбоз, важкі аневризми, гострі венозні пухлини, різні дерматити та шкірні інфекції, оскільки це може погіршити стан.

- Людям, які не можуть виразити свою волю або самостійно керувати пристроєм.
- Не дозволяйте маленьким дітям користуватися пристроєм або перебувати поруч під час його роботи.
- Не застосовуйте пристрій до голови, грудей або живота.
- Будь ласка, негайно припиніть використання, якщо ви відчуваєте біль у спині, запаморочення, блювоту, пульсацію або інші аномальні реакції організму.
- Робота пристрою розрахована на 15 хвилин за один сеанс; кожен сеанс не повинен перевищувати 15 хвилин. Після використання дайте машині відпочити протягом 30 хвилин для продовження терміну її служби.
- Людям, які не впевнені у своїх силах, та користувачам-початківцям не варто змушувати себе робити складні вправи на розтяжку.
- Не використовуйте пристрій ні для чого іншого, крім масажу стоп.
- **Пристрій не використовується у наступних випадках:**
 - Коли ви дуже втомлені.
 - Протягом години до або після їди.
 - Після вживання алкоголю.
- Поверхня, що нагрівається, швидко стає гарячою; людям, дуже чутливим до тепла, не слід нею користуватися.












Застереження (Cautions)

-  Під час використання не тягніть за шнур живлення, щоб уникнути обриву дроту або поганого контакту.
-  Будь ласка, регулярно очищуйте адаптер від пилу; його накопичення на штекері може призвести до поганої ізоляції через вологу і, зрештою, до пожежі.
-  При виникненні аномальної ситуації (наприклад, машина не працює) негайно припиніть використання та від'єднайте адаптер.
-  Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час використання, будь ласка, припиніть його.
-  У разі збою живлення від'єднайте адаптер.
-  Обов'язково відключайте адаптер від мережі, коли пристрій не використовується.
-  Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити фахівець від виробника або сервісного відділу, щоб уникнути небезпеки.
-  Не навантажуйте шнур живлення та не пошкоджуйте його.
-  Не ставайте на корпус пристрою і не використовуйте його як іграшку.
-  Ніколи не розбирайте, не змінюйте та не ремонтуйте виріб самостійно.
-  Суворо заборонено занурювати весь виріб у воду для очищення. Якщо пристрій випадково впав у воду, його необхідно відправити в ремонт.
-  Не використовуйте цей продукт безперервно більше 30 хвилин.
-  Не знімайте верхній чохол під час використання — це може призвести до нещасного випадку.
-  Не тягніть сильно за виріб і не штрикайте його ножем або гострими предметами.

Екологічні умови (Environmental conditions)

-  Не ставте пристрій біля плити або там, де використовується електричне опалення чи ковдри, що може спричинити пожежу.
-  Не накривайте виріб рушником або тканиною.
-  Не використовуйте пристрій поблизу ванн, душових кабін або інших місць із підвищеною вологістю.
-  Не використовуйте виріб у середовищі з сильним запиленням або корозійними газами.
-  Не використовуйте виріб при температурі в приміщенні вище 40°C.
-  Не використовуйте пристрій при температурі нижче 5°C, оскільки загушення мастила може збільшити знос механізмів.
-  Не використовуйте під час грози; виймайте вилку з розетки.
-  Не ставте пристрій поблизу вогню або під прямі сонячні промені.


Заходи безпеки при обслуговуванні

-  Під час технічного обслуговування обов'язково від'єднайте шнур живлення.
-  Якщо пристрій не використовується тривалий час, обов'язково вимкніть його з розетки.
-  Не кидайте корпус та зарядний пристрій, уникайте сильних ударів.
-  Не використовуйте виріб одночасно для двох людей.
-  Не допускайте потрапляння води на виріб.
-  Якщо пристрій не використовувався довго, перед роботою перевірте справність перемикача.
-  Під час чищення не використовуйте легкі олії, розчинники, спирт або агресивні миючі засоби.
-  Вироби захищені від ударів, придатні для транспортування різними видами транспорту. Уникайте дощу, снігу та зіткнень.
-  Зберігайте в недоступному для дітей місці.
-  Для тривалого зберігання: повністю зарядіть пристрій та тримайте його в сухому, прохолодному місці.
-  Рекомендується повністю заряджати пристрій кожні 2 місяці при тривалому зберіганні, щоб запобігти пошкодженню акумулятора.

2. Функції продукту


- Найявний режим гарячого компресу: завдяки вбудованій нагрівальній тканині з постійною температурою можлива фізіотерапія гарячими компресами.
- Передбачено розминальні рухи: механізм приводиться в дію двигуном для розминання та масажу стоп.

3. Компоненти

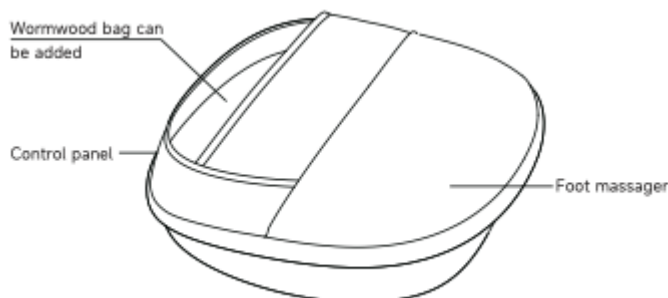

- **Wormwood bag**
- **Control panel** — Панель керування.
- **Foot massager** — Масажер для ніг.

Акcesуари:

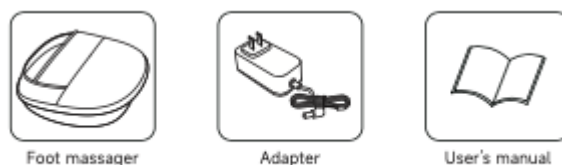

- Масажер для ніг (1 шт.).
- Адаптер (1 шт.).
- Посібник користувача (1 шт.).


4. Інструкції

Підготовка перед використанням

1. Будь ласка, перевірте цілісність пристрою та акcesуарів.
2. Будь ласка, знімайте підвіски та прикраси під час використання, щоб не пошкодити масажні частини.


Експлуатація

- **Adapter port** — Порт для адаптера.
- **Strength** — Інтенсивність.
- **Heating** — Нагрів.
- **Power/Mode** — Живлення/Режим.
- **Mode indicator light** — Індикатор режиму.
- **Heating indicator light** — Індикатор нагріву.

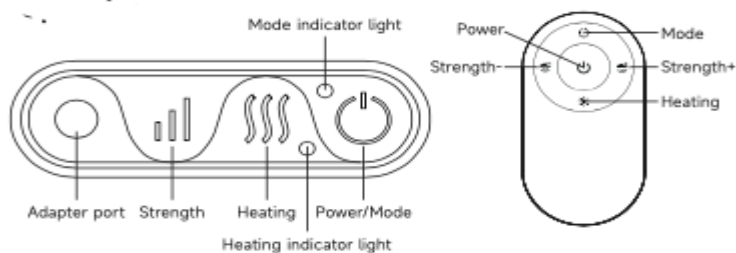

Пульт дистанційного керування:

- **Power** — Живлення.
- **Mode** — Режим.
- **Strength- / Strength+** — Зменшити / Збільшити інтенсивність.
- **Heating** — Нагрів.

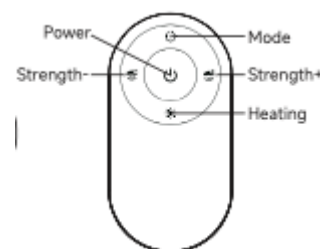

Порядок роботи:

- Перед використанням під'єднайте виріб до адаптера живлення. Після ввімкнення пролунає довгий звуковий сигнал — пристрій готовий до роботи.
- При натисканні кнопок лунає короткий сигнал. Після початку роботи пристрій автоматично вимкнеться через 15 хвилин.
- **Увімкнення:** Натисніть і утримуйте кнопку живлення/режиму протягом 2 секунд. За замовчуванням: інтенсивність 1, режим 1 (індикатор світиться білим), низький рівень нагріву (індикатор світиться білим).
- **Зміна режиму:** Натисніть кнопку живлення/режиму для перемикання: Режим 1 (білий індикатор) \rightarrow Режим 2 (світло-червоний) \rightarrow Режим 3 (червоний) \rightarrow Цикл.
- **Налаштування нагріву:** Натискайте кнопку нагріву для перемикання: Низький (білий) \rightarrow Середній (світло-червоний) \rightarrow Високий (червоний) \rightarrow Вимкнено \rightarrow Цикл.
- **Зміна інтенсивності:** Натискайте кнопку інтенсивності: Рівень 1 (за замовчуванням) \rightarrow Рівень 2 \rightarrow Рівень 3 \rightarrow Цикл.
- **Вимкнення:** Натисніть і утримуйте кнопку живлення/режиму протягом 2 секунд — функції нагріву та масажу вимкнуться, індикатори згаснуть.

5. Обслуговування та догляд

Метод очищення

- **Чохол виробу не знімається.**
 1. Видаліть пил із тканинного чохла виробу: не вибивайте його, використовуйте пилосос.
 2. Поверхневі забруднення можна видалити чистою ганчіркою.
 3. Для глибоких забруднень змочіть тканину в нейтральному мийному засобі, а потім обережно протріть.
 4. Не допускайте потрапляння води всередину виробу.
 5. Залиште висихати природним шляхом.
- Не зберігайте під прямими сонячними променями або у вологих місцях. Якщо виріб не використовується тривалий час, після очищення накрийте його тканиною та тримайте подалі від пилу.
- **Метод утилізації:** щоб захистити довкілля, не викидайте пристрій просто як сміття; будь ласка, дотримуйтесь вимог місцевих органів влади щодо утилізації відходів.
- **!** Під час технічного обслуговування обов'язково від'єднайте шнур живлення. Не витягуйте дрід мокрими руками.

6. Діагностика несправностей

Ознака несправності	Можлива причина	Рішення
Виріб не працює	Вилка живлення не вставлена належним чином	Надійно вставте вилку
	Кнопка живлення не натиснута	Будь ласка, активуйте кнопку живлення
	Час роботи занадто довгий, спрацював захист двигуна від перегріву	Зачекайте, поки двигун охолоне природним чином перед використанням
Раптово вимкнувся під час використання	Вимкнення адаптера	Перевірте, чи надійно підключено вилку
	Час масажу перевищив 15 хвилин, автоматичне вимкнення	Натисніть кнопку живлення знову, щоб почати
Звук ізсередини виробу	Цей звук спричинений механічною структурою виробу	Цей звук є нормальним
Шнур живлення пошкоджений / Дим із виробу	Якщо пристрій не використовувався довго, переконайтеся, що він справний перед використанням	Негайно припиніть використання та зверніться до сервісного центру
Періодична перевірка	Наявність будь-якої з наступних проблем: гарячий кабель/вилка; деформація/запах гару; незвичні звуки/вібрація; несправна кнопка; інші відхилення.	Якщо виявлено вищезазначене, припиніть використання, відключіть живлення та відправте пристрій до сервісної станції.

7. Заява про захист довкілля

1. Виріб відповідає вимогам щодо обмеження використання небезпечних речовин.
 2. Протягом терміну екологічно безпечного використання споживачі не стикатимуться з витоком шкідливих речовин.
 3. Термін екологічно безпечної експлуатації становить **10 років**.
-

8. Основні технічні параметри

- **Назва виробу:** Масажер для ніг
 - **Модель виробу:** 3200AW
 - **Стандарти:** GB 4706.1-2005, GB 4706.10-2008
 - **Адаптер:** Вхід AC110V-240V; Вихід 12V \cdot 2A
 - **Номінальна напруга / потужність:** 12V \cdot 22W
 - **Розмір / Вага:** 360340145 мм / Близько 1.6 кг
 - **Кабель адаптера:** Близько 1.8 м
-

9. Склад комплекту виробу

- Виріб (Масажер) — 1 шт.
- Посібник (Інструкція) — 1 шт.
- Адаптер — 1 шт.